



DANISH
DESIGN
- MADE IN
DENMARK

FLEXIBILITEIT
EN PERSOONLIJK
DESIGN MAKEN
UW UNIT TOT EEN
ACTIEVE PARTNER



2



KWALITET IS GEEN
OVERWEGING
- KWALITET IS DE
OPLOSSING




UnicLine
- FEEL THE DIFFERENCE


3

VOLLEDIGE STURING - MET DE VOET

De unieke, gepatenteerde ronde voetpedaal kan geactiveerd worden vanuit gelijk welke positie, zowel met de rechter als met de linker voet. Hij pint u niet vast op één bepaalde werkhouding. Met de voetpedaal regelt u de snelheid en activeert u de preselectie toerentallen van de gekozen instrumenten. Door het aantikken van de middelste ring op de voetpedaal activeert u de sprayfunctie en de mechanische chip-blow, en wisselt u de draairichting van de micromotor. Door een druk op de top van de voetpedaal bedient u de operatielamp of de assistentie oproep.

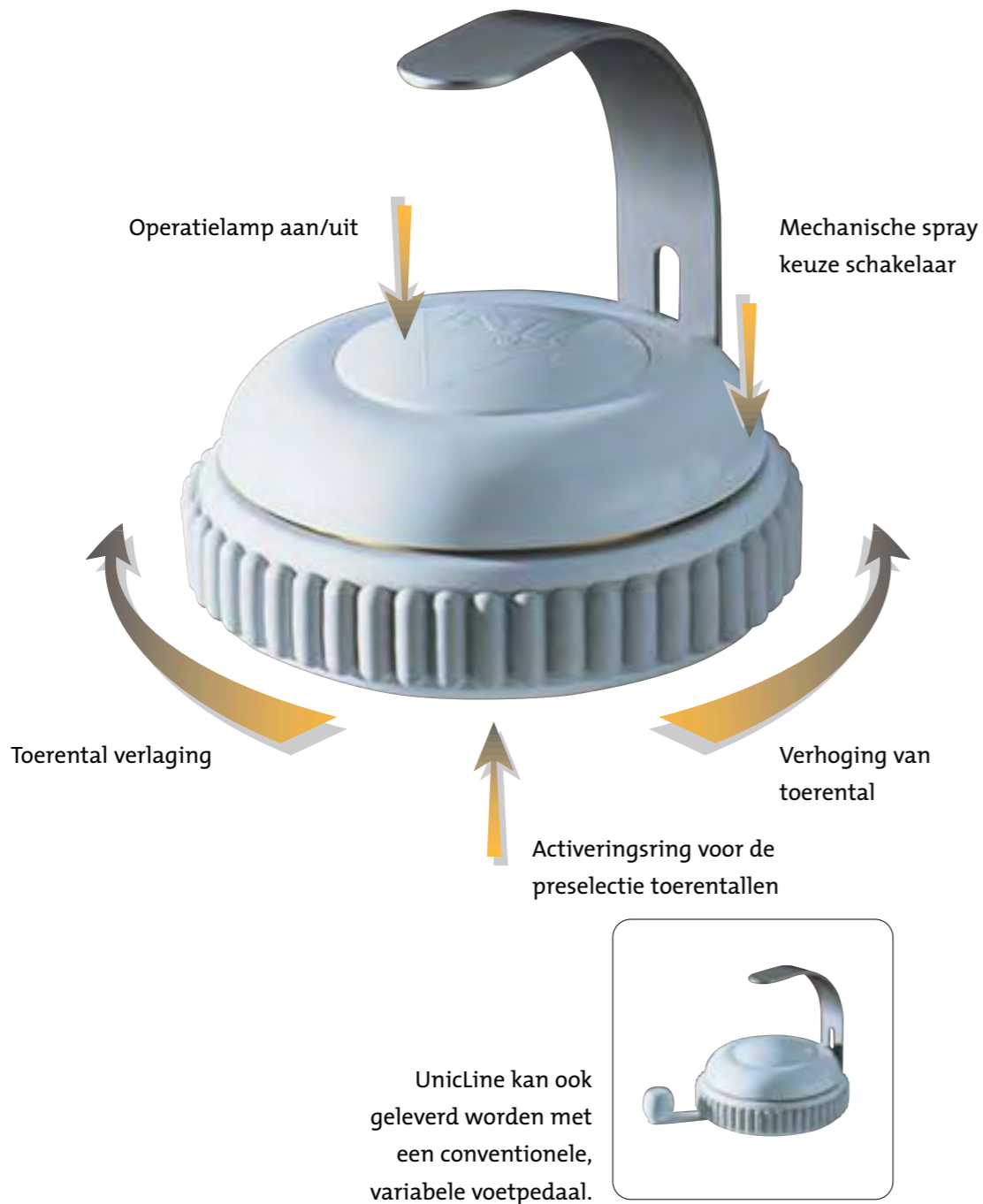

LAAT DE MOGELIJKHEDEN OPEN ELKE DAG

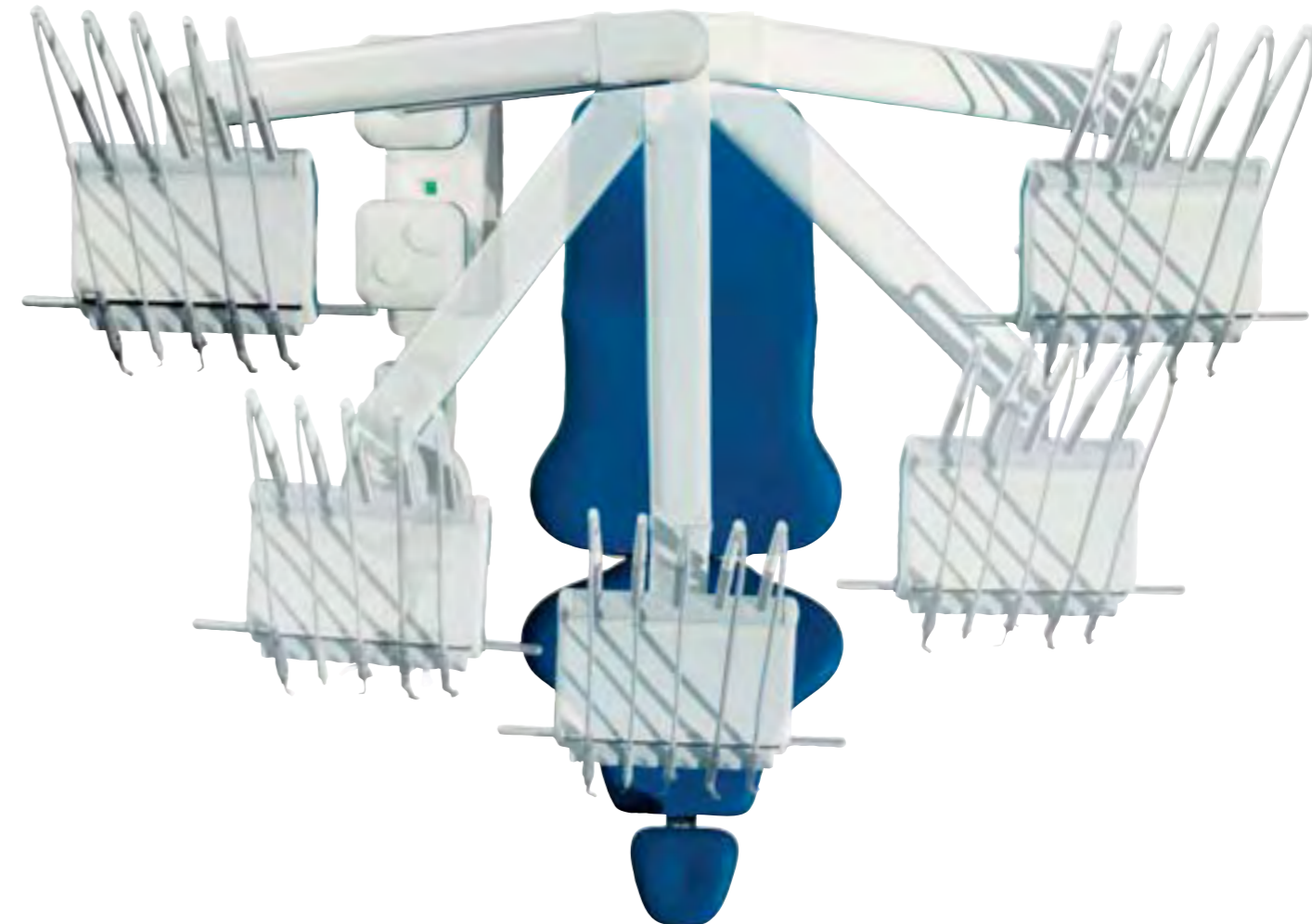



Overzicht


Een overzichtelijk display geeft duidelijk alle informatie over uw instelling van het instrumentarium.

Individuele instelling

De hoek van de instrumenten-houder kan individueel ingesteld worden voor elk instrument.

Met de vingertop

De druktoetsen aan de zijkant van de instrumentenbrug bedienen de tijdsinstelling, de tijdsduur van de composietlamp, de assistenteoproep en de spittoonfuncties. Bovendien kan u de micromotor testen.

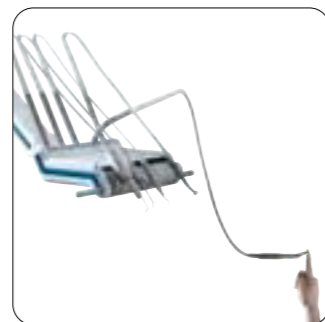

Een brede waaier van mogelijkheden


De Unicline D kan geleverd worden met 3 tot 6 uitgebalanceerde zweepinstrumenten of met 3 tot 6 hangende slangen, individueel geplaatst op de instrumentenbrug. U heeft de keuze uit meer dan 20 verschillende instrumenten, die allen met de voetpedaal bediend kunnen worden.

Ergonomie

Op de uitvoering met individueel uitgebalanceerde zweepen is ieder instrument perfect in balans en de extra lange silicone slangen verzekeren ergonomisch correcte werkhoudingen.


IEDER VAN ONS HEEFT EIGEN IDEEËN EN WENSEN. FLEXIBILITEIT BETEKENT ONDER ANDERE AANPASSING. DAAROM KAN IEDERE UNIT AANGEPAST WORDEN AAN DE NODEN EN WENSEN VAN ELKE TANDARTS



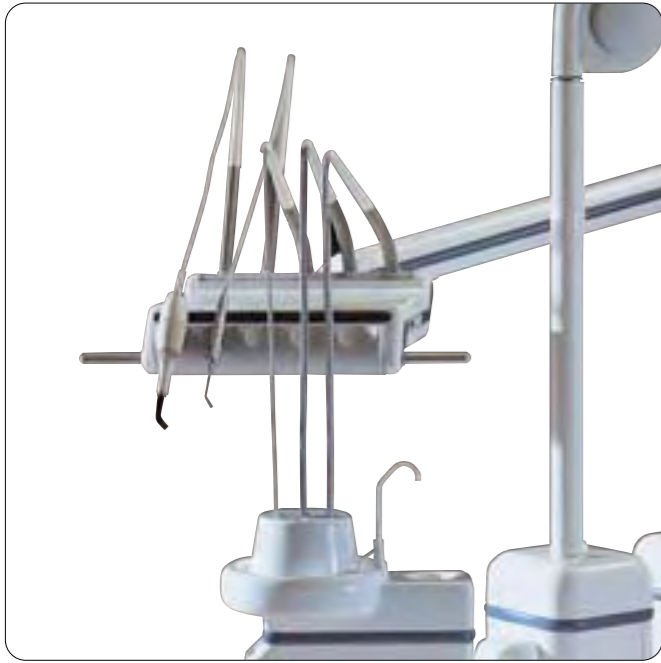


Doorspoelsysteem
Alle spraykanalen kunnen automatisch worden gereinigd.

Hygienic airrotation systeem
De unit kan volledig worden drooggeblazen in alle waterkanalen ter voorkoming van kalkaanslag, algen verstopping en legionella verspreiding.

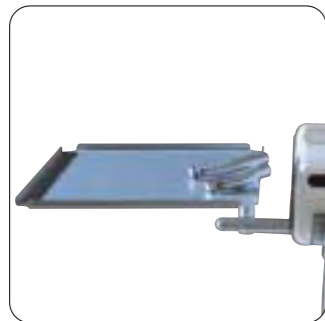


8

De aluminium handgrepen kunnen gemakkelijk verwijderd worden om te autoklaveren.

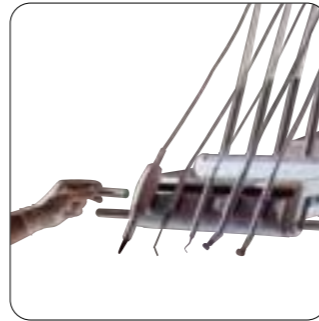

De rubberen instrumenten-houder kan gemakkelijk worden weggenomen voor reiniging.

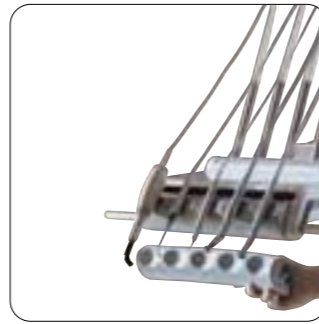

UnicLine 5D
- met enkele tray
- met dubbele tray (optie)
- met Röntgennegatoscoop (optie)



WAAROM EEN COMPROMIS AANGAAN
WAT BETREFT DE MATERIAALKEUZE
ALS U KAN KIEZEN VOOR EEN
ZETEL EN UNIT UIT ALUMINIUM
- DE ZEKERHEID VAN EEN
LEVENSLANGE KWALITEIT



9

UnicLine multimedia
UnicLine 5D met monitor
voor intra orale beelden,
digitale röntgenfoto's,
video of andere
IT-media (optie).



**FLEXIBILITEIT
BETEKEN
ONDER ANDERE
AANPASSING**



10



11



12

UNICLINE 5D
- EEN ELEGANT,
FUNCTIONEEL EN
TIJDLOOS DESIGN
MET AANDACHT
VOOR HET
MILIEU



13



14

UNICLINE 5D
KAN VOOR EEN
LINKSHANDIGE
AANGEPAST
WORDEN



15



LICHT MET INGEBOUWDE STABILITEIT



De UnicLine operatielamp gemonteerd op een zelf-balancerende veerarm geeft een perfect operatielicht en verzekert een stabiele positie.

VRIJE OPSTELLING

De cart-versie heeft dezelfde functies als de UnicLine 5D unit en is gebouwd op een solide aluminium profiel met verborgen wielen. De werkhogte van de instrumententafel kan manueel ingesteld worden voor zowel zittend als staand werken.



UnicLine Cart



Spoeleenheid

De stoeladapter voor de UnicLine patiëntenzetel kan uitgerust worden met een draaibare spoelkom met afzuiging, een extra tray, een operatielamp en een telescopische arm.



UnicLine Paal

HYGIËNE VOOR DE PATIËNT

UnicLine 5D is beschikbaar met een uniek reinigingssysteem voor de afzuigslangen, dat geactiveerd wordt door het indrukken van een druktoets op de afzuigarm. Hierdoor worden de afzuigslangen gedesinfecteerd opdat onmiddellijk een volgende patiënt behandeld kan worden. Tijdens de behandeling kunnen de afzuigslangen ook continu gedesinfecteerd worden.



UnicLine 5D wordt geleverd met ofwel regelbare afzuigcanules of met hygiënische aluminium afzuigcanules.



18



FLEXIBILITEIT

UnicLine 5D wordt geleverd met een flexibele, telescopische arm die ingesteld kan worden tot uw ideale werkpositie, zowel voor werken met assistente als zonder assistente. Op de telescopische arm kan een functiespuit of polymerisatielamp gemonteerd worden.



COMFORT

De spoelkom draait 90° naar elke kant en kan gemakkelijk afgenomen worden voor een grondige reiniging.



19



Armsteunen

Optioneel kan de UniclLine patiëntenzetel geleverd worden met één of twee armsteunen.




Joystick

De individueel gepositioneerde "joy sticks" (1, 2 of 3) verzekeren u en uw assistente van een ideale werkpositie.



Gemakkelijk te reinigen

Rugleuning en zitvlak gemakkelijk te demonteren voor reiniging.

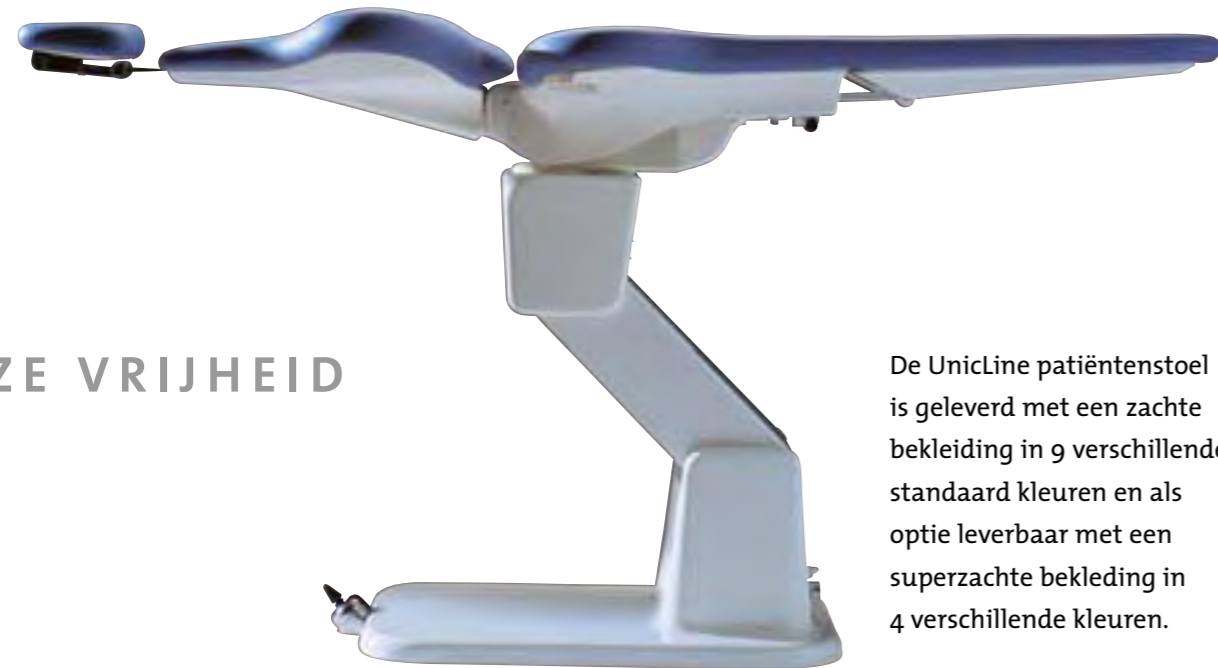

KEUZE VRIJHEID

De UniclLine patiëntenstoel is geleverd met een zachte bekleding in 9 verschillende standaard kleuren en als optie leverbaar met een superzachte bekleding in 4 verschillende kleuren.


COMFORT VOOR DE PATIËNT

De compenserende bewegingen van rugsteun en zitvlak en de aangebouwde armsteun verzekeren een comfortabele zithouding voor de patiënt gedurende de hele behandeling.



Stabiele positie
De dubbel gearticuleerde neksteun verbetert de positionering van het hoofd, zowel bij volwassenen als bij kinderen.



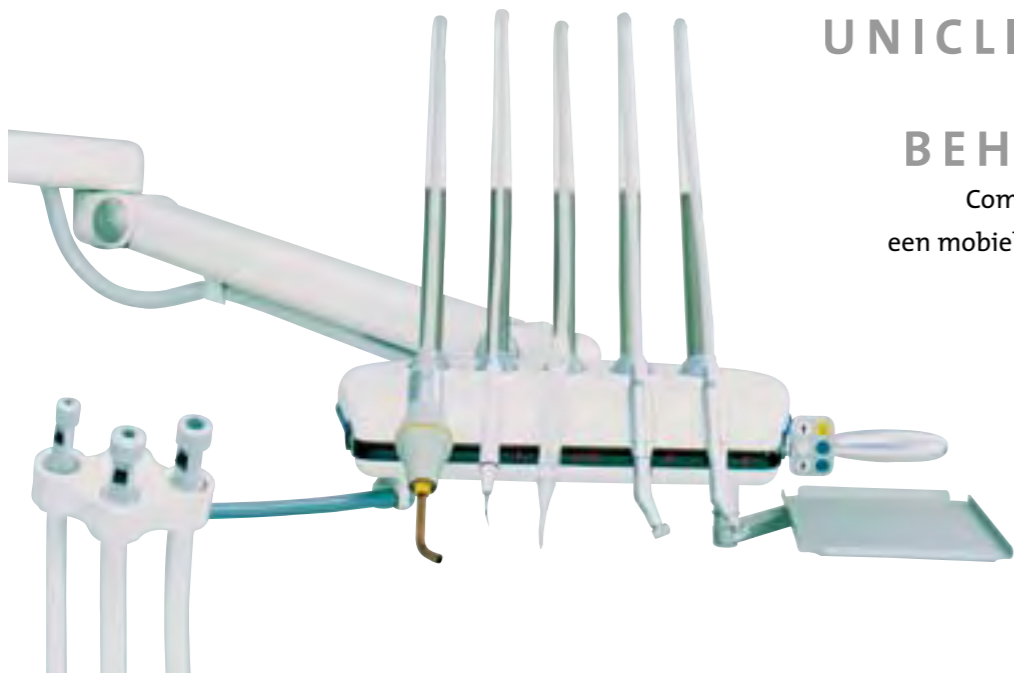

UNICLINE MOBILE - COMPLETE BEHANDELPLEK

Compleet uitgevoerd voor zowel
een mobiele behandelplek als voor een
definitieve behandelplek.

Instrumenten met 2 motoren,
3-functiespuit en polymerisatielamp.
De unit beschikt over een
amalgaamafscheider
compressor en opvang-tank
voor de afzuiging.
Alleen 220V aansluiting nodig.



UNIT, INSTRUMENTENTABLET, OP-LAMP, PATIENTENSTOEL EN RÖNTGEN



heka*dental*



Technische veranderingen en
vergissingen voorbehouden.
Kleurveranderingen
voorbehouden.



Heka Dental ApS
Baldershøj 38
DK-2635 Ishøj, Denmark
Phone +45 43 32 09 90
Fax +45 43 32 09 80
mail@heka-dental.dk
www.heka-dental.dk

En nu

Neem contact op met uw dealer. Hij zal u graag de mogelijkheden van de UnicLine 5D laten ontdekken.

